



Termékkatalógus

Vértelenítő készülékek,
tartozékok és
nyomásinfúziós eszközök



A teljes terméklistát lásd a www.adamed.hu , illetve a www.vbm-medical.com honlapokon
A honlapokon további információk találhatóak, mint adatlapok, katalógusok, videók, stb.

Az ebben a katalógusban lévő termékekben nincs természetes alapú latex, hacsak külön specifikáció ezt nem említi.
A katalógusban található termékek nem tartalmaznak ftalátokat, melyet a CLP Regulation (EC) 1272/2008 szerint külön címkével kell jelölni

Tartalomjegyzék



Elektronikus vértelenítők

Tourniquet Touch TT20 + TT15

4

4 - 6. oldal



Sűrített levegővel működő vértelenítők

Tourniquet 2500

7

7 - 8. oldal



Kézi vértelenítők

Kézi felfújó manométerrel
Kézi pumpa manométerrel

9

9. oldal



Vértelenítő mandzsetták

Szimpla mandzsetták
Dupla mandzsetták

10

10 - 14. oldal



Tartozékok vértelenítő készülékekhez, vértelenítő szalagok

Mérőszalag
Vértelenítő alátétek
Védőhuzat mandzsettákhoz

Kitakaró kendők
Gördülő vértelenítő
Esmarch szalagok

15

15 - 19. oldal



Nyomásinfúziós zsákok

Egyszer használatos zsákok (Dispo Infusor)
Nyomásinfúziós zsák (Infusor)
Nyomásinfúziós zsákok
Tartozékok nyomásinfúziós zsákokhoz

20

20 - 24. oldal



ELEKTRONIKUS VÉRTELENÍTŐK

Tourniquet Touch

A vértelenítő készülékek új generációja érintőképernyős technológiával



Jellemzők

Érintőképernyő

- 100% premium üveg
- Könnyen tisztítható és fertőtleníthető
- Sebészi kesztyűvel is használható

Kijelző

- 8" (800 x 480 képpont)
- Széles láthatósági szög (178°)
- matt, csillogásmentes, alacsony reflexiójú

Akkumulátor

- Lithium ion (14.4 V – 93.6 Wh)
- Kb. 8 óra üzemidőt biztosít

Tápfeszültség

- 100 – 240 VAC

Tömeg és méretek

- 4.5 kg
- magasság 186 mm | szélesség 263 mm | mélység 226 mm



TT20

Működtethető

- szimpla mandzsettával,
- dupla mandzsettával regionális intravénás anesztéziához (IVRA)
- két szimpla mandzsettával bilaterális sebészet esetén.

Tourniquet TT20

Két csatornával

3.0 m tekercselt összekötő csövekkel (kék és vörös)

REF 01-20-000

Box 1

TT15

Működtethető

- szimpla mandzsettával
- plusz nyomásinfúziós zsákkal öblítés céljára

Tourniquet TT15

Egy vértelenítő és egy öblítő csatornával

3.0 m tekercselt összekötő csövekkel (kék és fekete)

REF 01-15-000

Box 1

Összekötő csövek



- Tekerceslt összekötő csövek, kék/vörös/fekete
- Kiegyenesített hossza 3.0 m



- Tekerceslt összekötő cső kék/vörös/fekete
- Kiegyenesített hossz 3.0m



- Sima összekötő cső kék/vörös
- Hossza 4.5 m

Összekötő csövek

	TT 20	TT 20 + TT 15	TT 15	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Vértelenítő mandzsettákhoz ▪ Gyorscsatlakozó apa és anya 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Vértelenítő mandzsettákhoz ▪ Gyorscsatlakozó apa és anya 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nyomásinfúzióhoz ▪ Gyorscsatlakozó anya és Luer Lock apa 	
Hossza	vörös	kék	fekete	Box
3.0m tekerceslt	REF 20-20-742	REF 20-20-744	REF 20-20-740	1
6.0m tekerceslt	REF 01-00-520	REF 01-00-510	REF 01-00-530	1
4.5m sima	REF 20-20-942	REF 20-20-944	-	1

Gördülő állvány és kosár



Gördíthető állvány kosárral

- Egy kosárral, amely 2 kg-mal terhelhető
- 4 rögzíthető görgővel (2 ESD-vel)

Méretetek

- Magasság: 939 mm
- Szélesség: 400 mm
- Mélység: 400 mm

Tömeg

- 8.2 kg



Kosár

Méretetek

- Magasság: 185 mm,
- Szélesség: 377 mm,
- Mélység: 196 mm

Tömeg

- 0.73 kg

Gördülő állvány

kosárral

REF 01-00-100

Box

1

Kosár

Külön tételként

REF 01-00-110

Box

1



SŰRÍTETT LEVEGŐVEL MŰKÖDŐ VÉRTELENÍTŐK

Sűrített levegővel működő vértelenítő

Sűrített levegő – analóg nyomáskijelzés – biztonsági kézi felfújó - egy csatorna

Jellemzők

Nyomásszabályozás

- Pneumatikus precíziós nyomásszabályozó
- A mandzsetták gyors felfújása és leeresztése
- A szabályozó gomb nagyon pontos nyomásszabályozást biztosít
- A legnagyobb megengedett nyomás 600 Hgmm

Analóg nyomásmérő

- Nincs vibrálás a nyomásbeállítás közben
- Mindig a mandzsettában uralkodó tényleges nyomást mutatja
- Precíziós nyomásmérő műszer

Biztonsági kézi felfújó

- A sűrített levegő hálózat hibája esetén automatikusan kézi üzemre vált, a működéshez nincs szükség akkumulátorra.
- Minimális karbantartás igényel
- Bármikor használatra kész, még a sűrített levegő hiánya esetén is

Leeresztő gomb

- A véráramlás ellenőrzésére
- Kézi üzemmódban biztosítja a mandzsetták leeresztését

Kék színű, tekercselt öszekötő cső

- Biztonságos csatlakozást biztosít a mandzsetták és a készülék között
- Gyorscsatlakozóval (PLC)

Kézi beállítású időzítő óra

- Visszaszámlálási funkció hangjelzéssel
- Időmérő funkció

Sűrített levegővel működő vértelenítők

RECTUS típusú csatlakozóval, 4m hosszú nyomáscsővel

Készülék	Asztali készülék fogantyúval	Box
2500	REF 15-12-500	1

NIST típusú csatlakozóval (nyomáscső nélkül)

Készülék	Asztali készülék fogantyúval	Box
2500	REF 15-12-500NIST	1

	Gördülő állvány kosárral Tourniquet 2500 készülékekhez	Box
	REF 10-22-555	1



Kézi felfújó manométerrel

Max. 600 Hgmm nyomáshatárig



Kék színű, tekercselt összekötő csővel és gyorscsatlakozóval



Piros színű összekötő csővel és gyorscsatlakozóval

Kézi felfújó manométerrel

Max. 600 Hgmm nyomáshatárig

Kék színű tekercselt összekötő csővel és gyorscsatlakozóval	Piros színű tekercselt összekötő csővel és gyorscsatlakozóval	Box
REF 20-18-601	REF 20-18-602	1

Kézi felfújó pumpa manométerrel

Max. 600 Hgmm nyomáshatárig



Kék színű, tekercselt összekötő csővel és gyorscsatlakozóval



Piros színű összekötő csővel és gyorscsatlakozóval

Kézi felfújó pumpa manométerrel

Max. 600 Hgmm nyomáshatárig

Kék színű tekercselt összekötő csővel és gyorscsatlakozóval	Piros színű tekercselt összekötő csővel és gyorscsatlakozóval	Box
REF 20-19-601	REF 20-19-602	1



VÉRTELENÍTŐ MANDZSETTÁK


A mandzsetták választéka

A VBM cég szimpla és dupla mandzsettákat gyárt minden méretben, egyenes és kónuszos kivitelben, többször használható és egyszer használatos változatban


Tulajdonságok

Egyenes mandzsetták

- Hengeres kivitel
- A mandzsetta proximális és distális fele ugyanolyan átmérőjű
- Nagy felületű tépőzáras rögzítéssel rendelkezik a mandzsetta biztonságos rögzítése érdekében
- Vékony és közepes méretű felső végtagokhoz

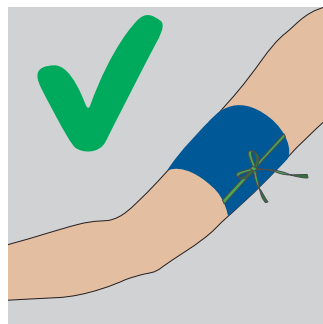


Egyenes mandzsetta

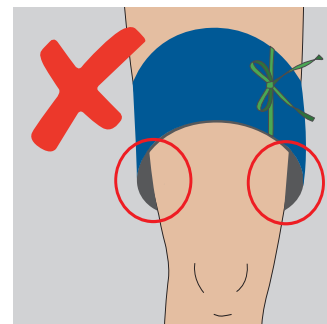

Egyenes mandzsetta

Kónuszos mandzsetták

- Íves kivitel, a distális rész átmérője kisebb mint a proximális részé
- A végtaghoz való javított illeszkedés miatt kisebb nyomás is elegendő a véráram blokkolásához
- Elsősorban a kónuszos alakú alsó végtagokhoz
- Nagy felületű tépőzáras rögzítéssel rendelkezik a mandzsetta biztonságos rögzítése érdekében
- Használata izmos végtagok esetén ajánlott, elhízott végtagnál pedig a mechanikus nyírás okozta kockázatok csökkentésére

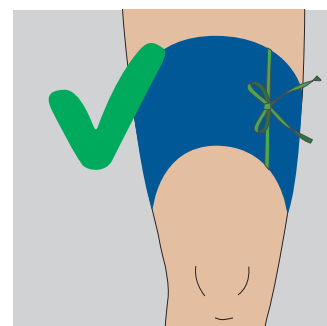

Kónuszos mandzsetta

Vértelenítő mandzsetták

Összehasonlító táblázat

	Dispo Cuff	Wipe Cuff	Silicone Velcro Cuff
Szimpla és dupla mandzsetta	✓	✓	✓
Egyenes és kónuszos mandzsetta	✓	✓	✓
Színkódolt a méretkiválasztás egyszerűsítése érdekében	✓	✓	✓
Nagy teherbírású szilikon felfújóbetét	-	-	✓
Alacsony profilú (vékony) mandzsetta (integrált felfújóbetéttel)	✓	✓	-
Természetes alapú gumilátex és PVC nélkül készül	✓	✓	✓
Gazdaságos használat validált újrafelhasználási eljárással	-	✓	✓
Biztonságos használat szabályos tisztítás és ellenőrzés mellett	-	✓	✓
Többször használható, kevesebb hulladék termelődik	-	✓	✓
Fertőtlenítés törléssel	-	✓	✓
Könnyen tisztítható és gyorsan szárad	-	✓	✓
Autoklávozható 134 °C-ig (273 °F)	-	-	✓

Tourniquet Dispo Cuff

Egyszer használatos vértelenítő mandzsetták



Tulajdonságok

A "Tourniquet Dispo Cuff" steril, egyszer használatos vértelenítő mandzsetta, melynek alkalmazása különösen olyan műtéteknél hasznos, ahol a kontamináció lehetősége nagy. Így csökkenthető a kórházi fertőzések kockázata. A mandzsetták egyenes (kicsi és közepes méretű felső végtagokhoz) valamint íves (főleg kúposabb alakú alsó végtagokhoz) kivitelben léteznek. A méretválaszték nagy, a mandzsetták színekódoltak, összhangban a szintén színekódolt mérőszalaggal, így könnyű kiválasztani az optimális mandzsettaméretet.

A mandzsetta kialakítása

- A nagyméretű tépőzárral biztonságos a rögzítés
- A színekód megkönnyíti a méretválasztást és az utánrendelést
- Az összekötő cső megtörésnek ellenálló szilikoncső
- Alacsony profilú és kis tömegű
- Kónuszos és egyenes forma
- PVC mentes

Kónuszos alak

- A kónuszos alak miatt a distális átmérő kisebb, mint a proximális, amikor felhelyezzük a végtagra.
- A végtagra való jobb felfekvés miatt kisebb mandzsetta-nyomás mellett érhető el ugyanolyan érelzáródás.
- Az integrált merevítő megakadályozza a mandzsetta elmozdulását.

Csomagolás

- Adagolónyílással ellátott doboz
- A színekód miatt egyszerű a méretválasztás és az utánrendelés
- A lapos csomagolás miatt könnyű a tárolás

Egyenes alak

- Henger alakú a végtagra való felhelyezés után
- Nincs különbség a proximális és distális rész átmérője között

Rendelési információ

Tourniquet Dispo Cuff / Szimpla, egyszer használatos, steril vértelenítő mandzsetta

Hossz	Szélesség		Egy csöves	Két csöves	Csomagolás
	Hossz	Szín			
20 cm	5 cm	-	REF 20-34-700SLZ-1	REF 20-36-700SLZ-1	10
30 cm	6 cm	■	REF 20-34-710SLZ-1	REF 20-36-710SLZ-1	10
35 cm	8 cm	■	REF 20-34-711SLZ-1	REF 20-36-711SLZ-1	10
46 cm	10 cm	■	REF 20-34-712SLZ-1	REF 20-36-712SLZ-1	10
46 cm	12 cm	■	REF 20-34-715SLZ-1*	REF 20-36-715SLZ-1*	10
61 cm	12 cm	■	REF 20-34-722SLZ-1*	REF 20-36-722SLZ-1*	10
76 cm	12 cm	■	REF 20-34-727SLZ-1*	REF 20-36-727SLZ-1*	10
86 cm	12 cm	■	REF 20-34-728SLZ-1*	REF 20-36-728SLZ-1*	10
107 cm	12 cm	■	REF 20-34-729SLZ-1*	REF 20-36-729SLZ-1*	10

Tourniquet Dispo Cuff / Dupla mandzsetta Intravénás Regionális Anesztéziához (IVRA), egyszer használatos, steril

Hossz	Szélesség		REF	Csomagolás
	Hossz	Szín		
30 cm	12 cm	■	20-30-710SLZ-1	10
46 cm	15 cm	■	20-30-712SLZ-1	10
61 cm	15 cm	■	20-30-722SLZ-1	10

Hosszabbító cső / Egyszer használatos, steril

Hossz	REF	Csomagolás
100 cm	20-39-100-1	5

* Kónuszos

További információ



Videó - kéz



Videó - láb



Katalógus

Tourniquet Wipe Cuff

Többször használható - Manuálisan, törléssel történő fertőtlenítéshez



Tulajdonságok

A "Tourniquet Wipe Cuff" egy tartós anyagból készült vértelenítő mandzsetta, amely törléssel történő fertőtlenítés után újra használható. A mandzsetták egyenes (kicsi és közepes méretű felső végtagokhoz) valamint íves (főleg a kúposabb alakú alsó végtagokhoz) kivitelben léteznek. A méretválaszték nagy, a mandzsetták színkódoltak, összhangban a szintén színkódolt mérőszalaggal, így könnyű kiválasztani az optimális mandzsettaméretet.

A mandzsetta kialakítása

- A nagyméretű tépőzárral biztonságos a rögzítés
- A színkód megkönnyíti a méretválasztást és az utánrendelést
- Az összekötő cső megtörésnek ellenálló szilikoncső
- Alacsony profilú és kis tömegű
- Kónuszos és egyenes forma
- PVC-mentes

Különleges tulajdonságok

- A speciális belső anyag gyorsan szárad a törléses fertőtlenítés után, így a mandzsetta hamarabb használható újból.
- A nyomkövetés biztosításához UDI-kóddal rendelkezik
- A mandzsetták a többszöri használat dokumentálása érdekében sorszámokkal vannak ellátva
- Akár 100-szor újra használható (törléses fertőtlenítéssel)

Kónuszos alak

- A kónuszos alak miatt a distális átmérő kisebb, mint a proximális, amikor felhelyezzük a végtagra.
- A végtagra való jobb felfekvés miatt kisebb mandzsetta-nyomás mellett érhető el ugyanolyan érelzáródás.
- Az integrált merevítő megakadályozza a mandzsetta elmozdulását.

Egyenes alak

- Henger alakú a végtagra való felhelyezés után
- Nincs különbség a proximális és distális rész átmérője között

Rendelési információ

Tourniquet Wipe Cuff / szimpla mandzsetta, többször használható

Hossz	Szélesség	Szín	REF	Csomagolás
20 cm	5 cm	-	20-75-700	1
30 cm	6 cm	■	20-75-710	1
35 cm	8 cm	■	20-75-711	1
46 cm	10 cm	■	20-75-712	1
46 cm	12 cm	■	20-75-715*	1
61 cm	12 cm	■	20-75-722*	1
76 cm	12 cm	■	20-75-727*	1
86 cm	12 cm	■	20-75-728*	1
107 cm	12 cm	■	20-75-729*	1

Tourniquet Wipe Cuff / Dupla mandzsetta Intravénás Regionális Anesztéziához (IVRA), többször használható,

Hossz	Szélesség	Szín	REF	Csomagolás
30 cm	12 cm	■	20-77-710	1
46 cm	15 cm	■	20-77-712	1
61 cm	15 cm	■	20-77-722	1

* Kónuszos

További információk



Videó - kéz




Videó - láb



Katalógus

Silicone Velcro Cuff

Szilikon tépőzárás mandzsetták - Automatikus újrafelhasználási eljárásokhoz

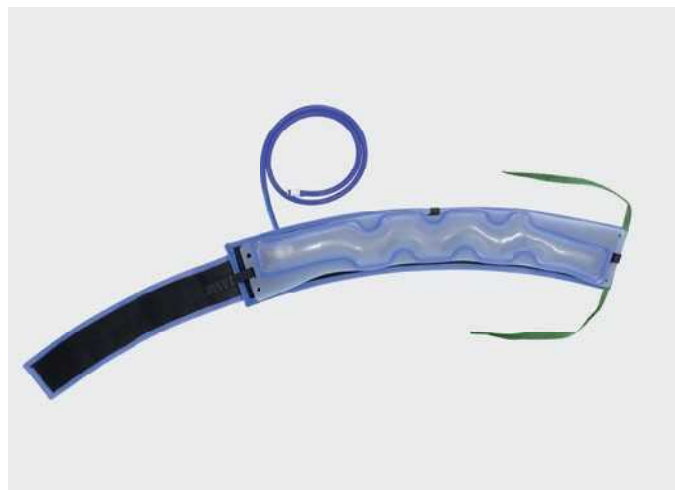

Tulajdonságok

A szilikon tépőzárás mandzsetták használata a legjobb választás, ha a biztonság, megbízhatóság, gazdaságosság hármaskörét egyszerre akarjuk teljesíteni. A tervezés és az anyagtulajdonságok lehetővé teszik, hogy az újrafelhasználási eljárások mindegyikét használhassuk: manuális törleves fertőtlenítés; automatikus és termikus tisztítás és fertőtlenítés. A szilikon tépőzárás mandzsetták hitelesítve vannak gőzben történő autoklávozásra is (134°C, 5 perc).

A mandzsetták kialakítása

- Nagyon szigorú gyártási folyamat a tartósság érdekében
- A VBM cég különleges megoldása a szilikon felfújóbetét és a külső huzat szétválasztására, emiatt könnyebb a tisztítás, gyorsabb a száradás
- Az összekötő cső 86 cm hosszú, szilikonból készült és ellenáll a megtörésnek
- A színkód megkönnyíti a méretválasztást és az utánrendelést
- PVC mentes

Kónuszos alak








- A kónuszos alak miatt a distális átmérő kisebb, mint a proximális, amikor felhelyezzük a végtagra.
- A végtagra való jobb felfekvés miatt kisebb mandzsetta-nyomás mellett érhető el ugyanolyan érelzáródás.
- A különleges felfújóbetét kialakítás (hullámos alak) megakadályozza a mandzsetta elmozdulását.

Egyenes alak




- Henger alakú a végtagra való felhelyezés után
- Nincs különbség a proximális és distális rész átmérője között

Rendelési információ

Silicone Velcro Cuff / Szimpla mandzsetta, többször használható, autoklávozható

Hossz	Szélesség		REF	Csomagolás
	Hossz	Szín		
20 cm	2.5 cm	-	20-64-700	1
30 cm	4 cm		20-64-710	1
35 cm	6 cm		20-64-611	1
46 cm	7.5 cm		20-64-612	1
46 cm	11 cm		20-64-512*	1
61 cm	11 cm		20-64-522*	1
76 cm	11 cm		20-64-527*	1
86 cm	11 cm		20-64-528*	1

Silicone Velcro Cuff / Dupla mandzsetta Intravénás Regionális Anesztéziához (IVRA), többször használható, autoklávozható

Hossz	Szélesség		REF	Csomagolás
	Hossz	Szín		
35 cm	12 cm		20-60-711	1
46 cm	12 cm		20-60-712	1
61 cm	13.5 cm		20-60-722	1

* kónuszos

További információk



Videó - kéz




Alkalmazást bemutató videó - láb



TARTOZÉKOK VÉRTELENÍTŐ MANDZSETTÁKHOZ

Mérőszalag

a VBM cég által gyártott vértelenítő mandzsettákhoz

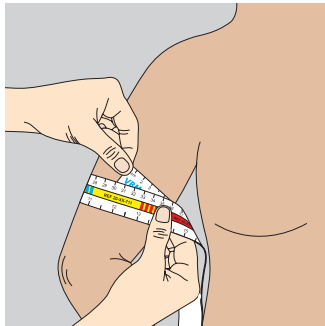

Jellemzők

- Színkódolt, hogy könnyen azonosítható legyen a végtag mérete és a hozzá való mandzsetta
- Egyszer használatos


Mérőszalag

REF 20-95-222

Box

50

Vértelenítő alátét

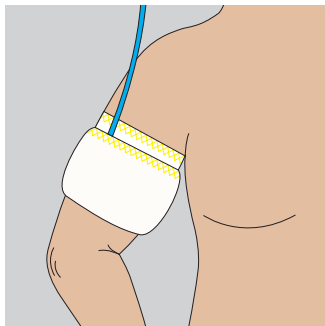


Tulajdonságok

- Védi a mandzsetta alatti lágy szöveteket
- Csökkenti a a lágy szövetek gyűrődés, becsípődés, elnyírás okozta károsodását
- Steril és nem steril változatban
- Egyszer használatos

Vértelenítő alátét

Páciens	Méret	Szín	Tiszta csomagolásban	Steril csomagolásban	Box
Csecsemő	≤ 20 cm	○	REF 23-00-700	REF 23-00-700-1	10
Gyermek	≤ 30 cm	●	REF 23-00-710	REF 23-00-710-1	10
Kar	≤ 35 cm	●	REF 23-00-711	REF 23-00-711-1	10
Kar	≤ 46 cm	●	REF 23-00-712	REF 23-00-712-1	10
Láb	≤ 61 cm	●	REF 23-00-722	REF 23-00-722-1	10
Láb	≤ 76 cm	●	REF 23-00-727	REF 23-00-727-1	10
Láb	≤ 86 cm	●	REF 23-00-728	REF 23-00-728-1	10
Láb	≤ 107 cm	●	REF 23-00-729	REF 23-00-729-1	10

Védőfólia

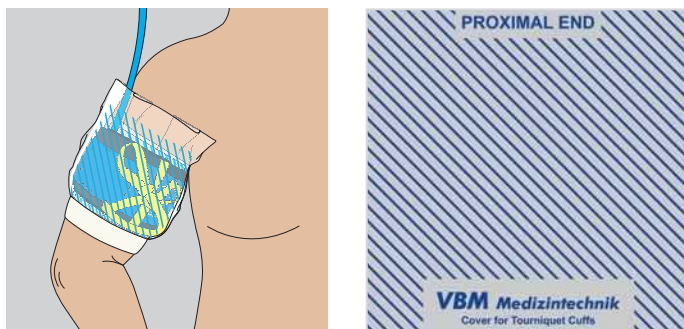


Tulajdonságok

- Megvédi a mandzsettát a szennyeződésektől
- Steril és nem steril változatban
- Egyszer használatos

Védőfólia

Méret	tiszta	Steril	Box
Kicsi	REF 20-11-111	REF 20-11-111-1	50
Közepes	REF 20-11-333	REF 20-11-333-1	50
Nagy	REF 20-11-222	REF 20-11-222-1	50

Izolációs fólia

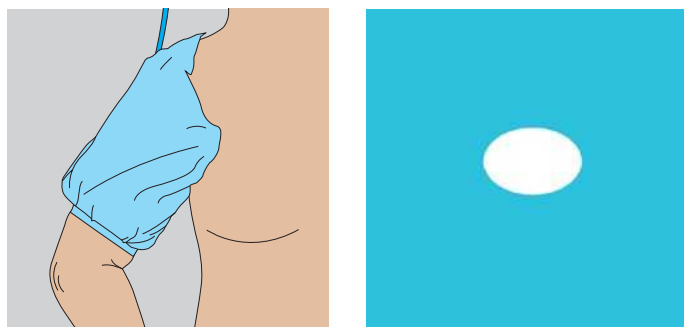

Tulajdonságok

- Elválasztja a mandzsettát a steril műtéti területtől
- Megakadályozza, hogy folyadék kerüljön a mandzsetta alá, ami kémiai sérülést okozhatna a bőrön
- Steril és nem steril változatban
- Egyszer használatos


Izolációs fólia a vértelenítő mandzsettákhoz

Méret	Tiszta	Box	Steril	Box
Karra	REF 24-00-100	40	REF 24-00-100-1	10
Lábra	REF 24-00-200	40	REF 24-00-200-1	10
Lábra, extra méret	REF 24-00-300	40	REF 24-00-300-1	10

Gördülő vértelenítő

Gyors és egyszerű vérkiszorítást biztosít másodpercek alatt

Az Esmarch szalag alternatívája

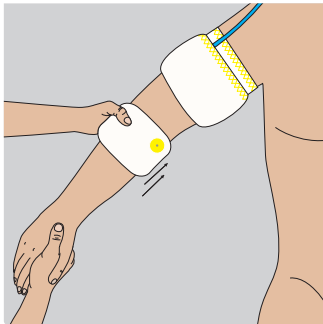

Tulajdonságok

- Felfújható vérekiszorító rendszer
- 100 %-ban orvosi tisztaságú szilikonból van
- Gyors és hatékony eljárás
- Teljes méretválaszték áll rendelkezésre
- Többször használható

Gördülő vértelenítő

Méret	Végtag	Szín	Többször használható	Box
2	26–33 cm	●	REF 21-95-712	1
3	31–40 cm	●	REF 21-95-719	1
4	38–49 cm	●	REF 21-95-722	1
5	47–60 cm	●	REF 21-95-727	1
6	58–70 cm	●	REF 21-95-729	1

Tartozékok



Kézi felfújó nyomásmérővel

- 200 Hgmm
- Összekötő cső (100 cm)
- Gyorscsatlakozók és felfújó tű



Sima összekötőcső

- Összekötő cső (100 cm)
- Gyorscsatlakozó apa és felfújó tű



Rögzítő ék

- Többször használható
- Anyaga szilikon



Mérőszalag a VBM gördülő vértelenítőhöz

Színkódolt az megfelelő méretű gördülő mandzsetta egyszerű kiválasztása érdekében

Kézi felfújó manométerrel

REF 21-95-300	Box	1
---------------	-----	---

REF 21-95-302	Box	1
---------------	-----	---

Rögzítő ék


Méret	Box
-------	-----

Kicsi	REF 21-95-200	1
Nagy	REF 21-95-201	1

Mérőszalag

REF 21-95-111	Box	10
---------------	-----	----

Esmarch szalag

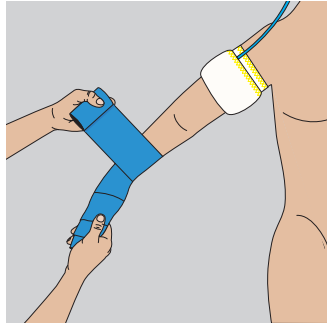

Tulajdonságok

- Bármilyen végtag esetén biztonságos vértelenítést tesz lehetővé
- Nagy méretválaszték: 5 különböző szélességi méretben
- Többször használatos vagy steril, egyszer használatos változatban

Esmarch szalag

Szélesség	Hosszúság	Többször használható	Box	Szélesség	Hosszúság	Steril, egyszer használatos	Box
6 cm	5 m	REF 20-20-060	5	6 cm	4 m	REF 20-21-060-1	10
8 cm	5 m	REF 20-20-080	5	8 cm	4 m	REF 20-21-080-1	10
10 cm	5 m	REF 20-20-100	5	10 cm	4 m	REF 20-21-100-1	10
15 cm	5 m	REF 20-20-150	5	15 cm	4 m	REF 20-21-150-1	10



NYOMÁSINFÚZIÓS ZSÁKOK

Dispo Infusor (500 ml / 1000 ml / 3000 ml)

Nyomásinfúziós zsákok az infúzió gyors beadására és öblítési célra

Jellemzők

Átlátszó háló

- Jól látható az infúziós zsák és a folyadékszint

Zsebes kivitel akasztóval, tépőzáras rögzítővel*

- Az infúziós zsák egyszerűen és gyorsan cserélhető

Nyomásindikátor

- Színkódolt, túlnyomás-szeleppel védett
- 360°-ban látható

Kézi felfújó

- Nagy térfogatú, gyors felfújást tesz lehetővé

Háromjáratú csap

- a nyomás ellenőrzésére
- gyors leeresztésre

Egyszer használatos

- Csökkenti a keresztfertőzések kockázatát

* Akasztóval és tépőzáras rögzítőszalaggal
Csak akasztóval: Dispo Infusor 3000 ml



"Dispo Infusor" Luer Lock anyacsatlakozóval

"Dispo Infusor" kézi felfújóval és háromjáratú csappal

"Dispo Infusor" kézi felfújóval, háromjáratú csappal és színkódolt nyomásindikátorral

Dispo Infusor

Méret	Luer Lock anyacsatlakozóval	Kézi felfújóval, háromjáratú csappal és színkódolt nyomásindikátorral	Box
500 ml		REF 56-02-050	5
1000 ml		REF 56-02-100	5
3000 ml	REF 56-01-300	REF 56-02-300	1

Infusor (500 ml / 1000 ml / 3000 ml)

Nyomásinfúziós zsák infúzió gyors beadására és öblítési célokra

Jellemzők

Teljesen átlátszó

- Lehetővé teszi, hogy folyadékszint jól látható legyen minden irányból
- 360°-ban látható folyadékszint

Körbetekerős kivitel akasztóval

- Az infúziós zsák könnyen és gyorsan cserélhető
- Egyenletes nyomáseloszlás az infúziós zsák teljes felületén

Nyomásmérő műszer

- Precíziós manométer
- Pontos mérés a 0 – 300 Hgmm tartományban

Kézi felfújó

- Nagy térfogatú, gyors felfújást tesz lehetővé

Háromjáratú csap

- A nyomás ellenőrzésére
- Gyors leeresztésre

Többször használható

- Könnyen tisztítható (anyaga PU)



"Infusor" Luer Lock anyacsatlakozóval

"Infusor " kézi felfújóval, háromjáratú csappal és nyomásindikátorral

"Infusor" kézi felfújóval, háromjáratú csappal és precíziós manométerrel

Infusor

Méret	Luer Lock anyacsatlakozóval	Kézi felfújóval, háromjáratú csappal és szinkódolt nyomásindikátorral	Kézi felfújóval, háromjáratú csappal és precíziós manométerrel	Box
500 ml	–	REF 57-02-050	REF 57-08-050	1
1000 ml	–	REF 57-02-100	REF 57-08-100	1
3000 ml	REF 57-01-300		REF 57-08-300	1

Nyomásinfúziós zsák (500 ml / 1000 ml)

Nyomásinfúziós zsákok infúzió gyors beadására és öblítési célokra

Jellemzők

Átlátszó háló

- Jól látható a behelyezett infúziós zsák és a folyadékszint

Zsebes kivitel kettős akasztóval

- Az infúziós zsák könnyen és gyorsan cserélhető

Nyomásmérő műszer

- Precíziós manométer
- Pontos nyomásmérés a 0 – 300 Hgmm tartományban

Kézi felfújó

- Nagy térfogatú, gyors felfújást tesz lehetővé
- Leeresztő szelep a nyomásbeállításához

Többször használható



Nyomásinfúziós zsák kézi felfújóval, háromjáratú csappal és színekódolt nyomásindikátorral

Nyomásinfúziós zsák kézi felfújóval, háromjáratú csappal és precíziós nyomásmérővel

Klasszikus nyomásinfúziós zsák - többször használatos

Méret	Luer Lock anyacsatlakozóval	Kézi felfújóval, háromjáratú csappal és színekódolt nyomásindikátorral	Kézi felfújóval, háromjáratú csappal és precíziós manométerrel	Box
500 ml	–	REF 58-02-050	REF 58-08-050	1
1000 ml	–	REF 58-02-100	REF 58-08-100	1
3000 / 5000 ml	REF 58-01-300		REF 58-08-300	1

Nyomásmérő műszer

Túlnyomás ellen védett, a nyomásinfúziós zsákhoz rögzíthető kivitelű



Nyomásmérő 300 Hgmm

REF 20-17-301

Box

1

Kézi felfújó



Kézi felfújó

Színkódolt nyomáindikátorral és háromjratú csappal

REF 51-02-666

Box

1



Kézi felfújó

Leeresztő szeleppel

REF 51-10-666

Box

1



Kézi felfújó

Háromjratú csappal

REF 51-03-666

Box

1



VBM Medizintechnik GmbH

Einsteinstrasse 1
72172 Sulz a. N.
Germany
Tel.: +49 7454 9596-0
Fax: +49 7454 9596-33
e-mail: info@vbm-medical.de
www.vbm-medical.de


Pásztor ADA-MED Kft.

1029 Budapest, Zsolt fejedelem u. 19/B.
Tel: +3630-9523229
Fax: +361-3970109
E-mail: adamed@adamed.hu
www.adamed.hu

Connect with us:



További VBM termékkatalógusok

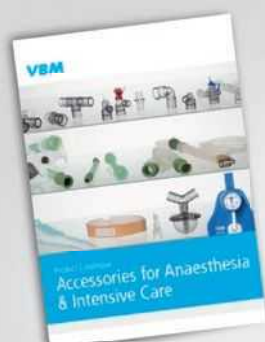

CE/CE₀₁₂₃
KAT_KY_2.0_EN_10.19
KAT_KY_2.0_HU_03.20